

セパレーター方式 【特定化学物質障害予防規制対応品】



# 卓上電気炉

(ガス準雰囲気炉)

アルミナ卓上電気炉 AMFA-20




株式会社 アサヒ理化製作所

## 特 長

- **ガス準雰囲気炉として**  
炉内をガス置換出来る様に一体成形し、扉との気密性も良くしてあります。又標準で出入口ノズルもついてありますので(本体後部)超電導研究等のガス準雰囲気炉としても使用出来ます。
- **消費電力が少なく、昇温が早い**  
従来の機種に比べ昇温時間が1時間(常温～1000℃)と早くアルミナファイバーによる熱板一体成形です。
- **電気炉の炉体は全てアルミナ繊維で制作しています。**
- **特定化学物質障害予防規制対応品**  
になっております。

## ● 外形図

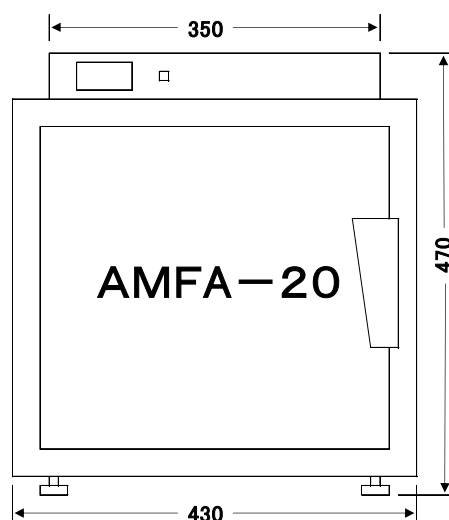

## 仕 様

使用温度範囲 : 常温 ~ 1200℃

常用使用温度 : 1100℃

温度上昇時間 : 常温 ~ 1000℃ (1h)

ガス導入口 : 磁性管 外径10φ 内径6φ (±1mm)

発熱体 : FCH-1

熱電対 : K熱電対仕様 (R熱電対仕様製作可)

出荷時電源 : AC100V

断熱材 : アルミナファイバー成形(炉体)

## ● 規格・寸法

型 式	内 寸 法 W×H×D(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	ヒーター容量	重量
AMFA-20	200×150×300	430×470×560	1.5kW	40kg

## 価 格

型 式	温度コントロール部※	炉 本 体	参考価格
AMFA-20N	174,000	オープン価格	734,000～

※ 温度コントローラーについては、定置制御(AMF-N型)タイプとなります。

また、ご希望により各種温度コントローラー(精密タイプ・プログラマータイプ)をセットすることが可能です。

その際の価格等につきましては、別途お問い合わせ下さい。

## ● オプション・消耗品

品名	使用機種	価格	備考
ソフラン板(路床板)	AMFA-20	13,500円	寸法:290mm×190mm×10t
K熱電対	AMFA-20	13,500円	型式:R64NU200VH3

温度を科学する

株式会社 **アサヒ理化製作所**

本社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地の3

〒262-0043 TEL 043-257-9123(代)

FAX 043-257-9229

代理店