

セパレーター方式



卓上電気炉

(ガス準雰囲気炉)

セラミック卓上電気炉 AMF-25



株式会社 アサヒ理化製作所

特長


● ガス準雰囲気炉として

炉内をガス置換出来る様に一体成形し、扉との気密性も良くしてあります。又標準で出入口ノズルもついてありますので(本体後部)超電導研究等のガス準雰囲気炉としても使用出来ます。

● 消費電力が少なく、昇温が早い

従来の機種に比べ昇温時間が1時間(常温～1000℃)と早くセラミックファイバーによる熱板一体成形です。

● 外形図

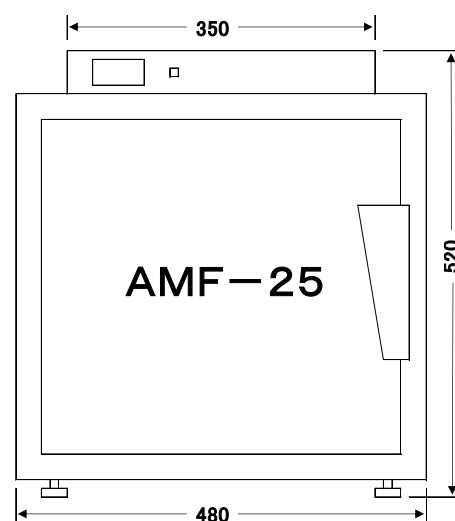

仕様

使用温度範囲 : 常温 ~ 1200℃

常用使用温度 : 1100℃

温度上昇時間 : 常温 ~ 1000℃ (1h)

ガス導入口 : 磁性管 外径10φ 内径6φ (±1mm)

発熱体 : FCH-1

熱電対 : K熱電対仕様 (R熱電対仕様製作可)

出荷時電源 : AC200V

断熱材 : セラミックファイバー成形(炉体)

● 規格・寸法

型式	内寸法 W×H×D(mm)	外寸法 W×H×D(mm)	ヒーター容量	重量
AMF-25	250×200×500	480×520×760	3.0kW	60kg

価格

型式	温度コントロール部※	炉本体	参考価格
AMF-25N	174,000	890,000	1,064,000円

※ 温度コントローラーについては、定置制御(AMF-N型)タイプとなります。

また、ご希望により各種温度コントローラー(精密タイプ・プログラマータイプ)をセットすることが可能です。その際の価格等につきましては、別途お問い合わせ下さい。

● オプション・消耗品

品名	使用機種	価格	備考
ソフラン板(路床板)	AMF-25	21,000円	寸法:490mm×240mm×10t
K熱電対	AMF-25	16,500円	型式:R64NU300VH3

温度を科学する

株式会社 **アサヒ理化製作所**

本社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地の3
〒262-0043 TEL 043-257-9123(代)
FAX 043-257-9229

代理店